

Thông số kỹ thuật – Nội nha

Trâm tay, trâm máy, côn gutta-percha, côn giấy, dung dịch bơm rửa và máy định vị chóp.



Trâm tay K-File MANI 25 mm, vĩ 6 cây

Trâm tay thép không gỉ tiết diện vuông, dùng thăm dò và tạo hình ống tủy.

Mã sản phẩm	MD-EN-001
Quy cách	Vĩ 6 cây
Chiều dài	25 mm
Kích cỡ	#15-40
Thương hiệu	MANI (Nhật Bản)

Hướng dẫn sử dụng

1. Xác định chiều dài làm việc
2. Dùng động tác xoay $\frac{1}{4}$ vòng và kéo
3. Bơm rửa giữa các cỡ trâm
4. Tiệt trùng trước khi dùng




Trâm tay H-File MANI 25 mm, vĩ 6 cây

Trâm H-File cắt ngà hiệu quả bằng động tác kéo, phù hợp làm sạch thành ống tủy.

Mã sản phẩm	MD-EN-002
Quy cách	Vĩ 6 cây
Chiều dài	25 mm
Kích cỡ	#15-40
Thương hiệu	MANI (Nhật Bản)

Hướng dẫn sử dụng

1. Chỉ dùng động tác kéo, không xoay
2. Bơm rửa thường xuyên
3. Kiểm tra trâm trước mỗi lần dùng

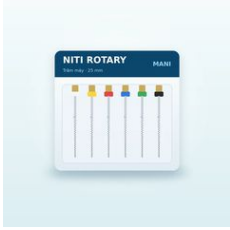

Trâm máy NiTi MANI, vĩ 6 cây

Trâm máy hợp kim NiTi siêu đàn hồi, tạo hình ống tủy nhanh và an toàn với ống tủy cong.

Mã sản phẩm	MD-EN-003
Quy cách	Vĩ 6 cây
Chiều dài	25 mm
Tốc độ khuyến nghị	300 vòng/phút
Thương hiệu	MANI (Nhật Bản)

Hướng dẫn sử dụng

1. Mở đường bằng trâm tay #10-15
2. Cài đặt motor theo tốc độ và torque khuyến nghị
3. Bơm rửa sau mỗi trâm



Côn gutta-percha EndoMax côn 0.04, hộp 120 cây

Côn gutta-percha dẻo, đồng đều kích thước, dùng trám bít ống tủy.

Mã sản phẩm	MD-EN-004
Quy cách	Hộp 120 cây
Côn	0.04
Kích cỡ	#15-40
Xuất xứ	Đức

Hướng dẫn sử dụng

1. Chọn côn chính theo trâm cuối
2. Thử côn và chụp phim kiểm tra
3. Trám bít theo kỹ thuật lèn

**Côn giấy thấm EndoMax côn 0.04, hộp 120 cây**

Côn giấy thấm hút nhanh, làm khô ống tủy trước khi trám bít.

Mã sản phẩm	MD-EN-005
Quy cách	Hộp 120 cây
Côn	0.04
Xuất xứ	Đức

Hướng dẫn sử dụng

1. Chọn côn giấy theo cỡ trám cuối
2. Đưa vào ống tủy đến chiều dài làm việc
3. Thay côn đến khi khô

**Dung dịch bơm rửa ống tủy NaOCl 3%, chai 500 ml**

Dung dịch natri hypoclorit 3% hòa tan mô tủy và diệt khuẩn trong ống tủy.

Mã sản phẩm	MD-EN-006
Quy cách	Chai 500 ml
Nồng độ	3%
Xuất xứ	Đức

Hướng dẫn sử dụng

1. Dùng kim bơm rửa đầu bên
2. Bơm chậm, không kẹt kim
3. Bảo quản nơi mát, tránh ánh sáng



Máy định vị chóp EndoMax Apex Pro

Máy định vị chóp màn hình màu, đo chính xác trong môi trường ẩm, hiển thị trực quan.

Mã sản phẩm	MD-EN-007
Màn hình	LCD màu 3,5 inch
Nguồn	Pin sạc Li-ion
Bảo hành	12 tháng
Xuất xứ	Đức

Hướng dẫn sử dụng

1. Kẹp móc môi vào khốe miệng
2. Kẹp trâm và đưa vào ống tủy
3. Dừng khi màn hình báo 0.5