

# Thông số kỹ thuật – Dụng cụ & mũi khoan

Mũi khoan kim cương, carbide, tay khoan và dụng cụ khám, chỉ khâu phẫu thuật.




## Bộ mũi khoan kim cương MANI, 10 mũi

Mũi khoan kim cương độ bền cao, cắt êm, phù hợp mài cùi và tạo xoang.

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Mã sản phẩm | MD-BR-001       |
| Quy cách    | Bộ 10 mũi       |
| Chuôi       | FG Ø1.6 mm      |
| Thương hiệu | MANI (Nhật Bản) |

Hướng dẫn sử dụng

1. Lắp mũi chắc vào tay khoan nhanh
2. Dùng với nước làm mát
3. Làm sạch và tiệt trùng sau dùng

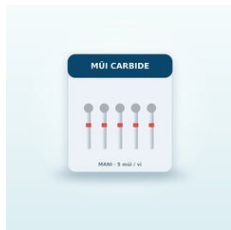

## Mũi khoan carbide tròn MANI, vĩ 5 mũi

Mũi carbide tròn lấy mô sâu và mở tủy, cắt sắc, ít rung.

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Mã sản phẩm | MD-BR-002           |
| Quy cách    | Vĩ 5 mũi            |
| Chuôi       | RA (tay khoan chậm) |
| Thương hiệu | MANI (Nhật Bản)     |

Hướng dẫn sử dụng

1. Lắp vào tay khoan chậm
2. Dùng tốc độ vừa phải
3. Tiệt trùng sau dùng

**Tay khoan nhanh DentaPro HS-500 có đèn LED**

Tay khoan nhanh đầu nhỏ, đèn LED chiếu sáng, 3 tia nước làm mát.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Mã sản phẩm</b> | MD-HP-001                 |
| <b>Tốc độ</b>      | 350.000–400.000 vòng/phút |
| <b>Kết nối</b>     | 4 lỗ                      |
| <b>Bảo hành</b>    | 12 tháng                  |
| <b>Xuất xứ</b>     | Hàn Quốc                  |

Hướng dẫn sử dụng

1. Tra dầu trước khi hấp
2. Chạy không 30 giây sau tra dầu
3. Hấp tiệt trùng sau mỗi bệnh nhân

**Tay khoan chậm khuỷu DentaPro Contra 1:1**

Tay khoan chậm khuỷu truyền động 1:1, vận hành êm, dùng với mũi RA.

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Mã sản phẩm</b>  | MD-HP-002   |
| <b>Tỉ số truyền</b> | 1:1         |
| <b>Mũi dùng</b>     | RA Ø2.35 mm |
| <b>Xuất xứ</b>      | Hàn Quốc    |

Hướng dẫn sử dụng

1. Lắp vào motor chậm
2. Tra dầu định kỳ
3. Hấp tiệt trùng sau dùng

**Bộ dụng cụ khám răng 3 món inox**

Gương, thám trầm và kẹp gấp inox 304, hấp tiệt trùng được.

**Mã sản phẩm** MD-IN-001

**Quy cách** Bộ 3 món

**Chất liệu** Inox 304

**Xuất xứ** Ý

Hướng dẫn sử dụng

1. Rửa sạch và sấy khô
2. Đóng túi tiệt trùng
3. Hấp 134 °C

**Chỉ khâu nha khoa MANI 4-0, kim tam giác 19 mm**

Chỉ khâu phẫu thuật kim sắc, xuyên mô dễ dàng, dùng trong nhổ răng và phẫu thuật nha chu.

**Mã sản phẩm** MD-SU-001

**Cỡ chỉ** 4-0

**Kim** Tam giác 3/8, 19 mm

**Quy cách** Hộp 12 gói

**Thương hiệu** MANI (Nhật Bản)

Hướng dẫn sử dụng

1. Kiểm tra bao bì còn nguyên
2. Dùng kìm kẹp kim chuyên dụng
3. Hủy kim đúng quy định